

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
БЕЛАРУСИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВУЮ»

СОГЛАСОВАНО

И.о. заместителя директора
по науке БелНИИМ

Т.А. Коломиец

« 03 » 2007 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор РУП
«Научно-практический центр
Национальной академии наук
Беларуси по продовольствию»

З.В. Ловкис

« 28 » 03 2007 г.



**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ЭКСТРАКТА В
КОНЬЯКАХ И КОНЬЯЧНЫХ СПИРТАХ И ПРИВЕДЕННОГО
ЭКСТРАКТА В КОНЬЯКАХ**

Методика выполнения измерений

МВИ, МН 2669-2007

МВИ аттестована
РУП «Белорусский государственный
институт метрологии»
Свидетельство об аттестации
№ 435/2007
от « 30 » 03 2007 г.

РАЗРАБОТАНО

Начальник лаборатории испытания и
исследования продукции и сырья
РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по
продовольствию»

И.М. Почицкая

« 28 » 03 2007 г.

Почицкая

1 Область применения

Настоящая методика выполнения измерений устанавливает метод определения содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках.

Диапазон измерений массовой концентрации общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах от 0,5 до 20 г/дм³. Предел измерения массовой концентрации общего экстракта 0,2 г/дм³.

Диапазон измерений массовой концентрации приведенного экстракта в коньяках от 0,5 до 4,20 г/дм³. Предел измерения массовой концентрации приведенного экстракта 0,2 г/дм³.

Методика обеспечивает получение достоверных результатов измерений при принятой доверительной вероятности $P = 0,95$ в указанном диапазоне измерений концентраций. Метрологические характеристики методики представлены в табл.1 и табл.2.

Таблица 1 - Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, воспроизводимости и точности при доверительной вероятности $P=0,95$

Определяемый показатель (компонент)	Диапазон измерений (массовая концентрация), г/дм ³	Показатель повторяемости (среднее квадратическое отклонение повторяемости) σ_r , % отн.	Показатель воспроизводимости (среднее квадратическое отклонение воспроизводимости) σ_R , % отн.	Показатель правильности (границы, в которых находится систематическая погрешность методики) $\pm\Delta_c$, % отн.	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность методики) $\pm\Delta$, % отн.
1.Общий экстракт	0,5-20,0	1,6	2,5	0,11	2,2
2.Приведенный экстракт	0,5-4,20	1,8	2,9	3,3	4,1

Таблица 2 - Диапазон измерений значения пределов повторяемости и воспроизводимости при доверительной вероятности $P=0,95$

Определяемый показатель (компонент)	Диапазон измерений (массовая концентрация), г/дм ³	Предел повторяемости (для двух результатов параллельных определений) r , % отн.	Предел воспроизводимости (для двух результатов измерений) R , % отн.
1.Общий экстракт	0,5-20,0	4,5	7,0
2.Приведенный экстракт	0,5-4,20	5,1	7,9

В случае получения результатов, выходящих за пределы диапазона измерений, допускается разбавление или концентрирование пробы.



2 Нормативные ссылки

В настоящей методике выполнения измерений использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее ТНПА):

- | | |
|-----------------|---|
| СТБ 1384-2003 | Продукты винодельческой промышленности. Правила приемки и методы отбора проб. |
| ГОСТ 450-77 | Кальций хлористый технический. Технические условия |
| ГОСТ 3145-84 | Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия |
| ГОСТ 9147-80 | Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. |
| ГОСТ 13192-73 | Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров |
| ГОСТ 24104-2001 | Весы лабораторные. Общие технические требования |
| ГОСТ 25336-82 | Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |

3 Принцип метода

Метод основан на определении содержания общего экстракта путем измерения массы нелетучих веществ коньяков и коньячных спиртов после высушивания пробы досуха.

По разнице значений величин общего экстракта и сахара вычисляют массовую концентрацию приведенного экстракта в коньяках. Содержание сахара определяется титриметрическим методом по ГОСТ 13192.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы.

- весы лабораторные ВЛР-200 общего назначения, класс II, с наибольшим пределом взвешивания 200 г- по ГОСТ 24104;
- электрошкаф с терморегулятором, который обеспечивает создание и поддержание температуры $(105 \pm 2) ^\circ\text{C}$;
- эксикатор 2-190 или 2-250 - по ГОСТ 25336;
- баня водяная;
- кальций хлористый технический прокаленный - по ГОСТ 450 или другие осушители;



- пипетки с одной отметкой вместимостью 50, 100 см³ - по ГОСТ 29169;
- чашка фарфоровая № 3 – по ГОСТ 9147;
- щипцы с резиновыми наконечниками;
- термометр тип А, с диапазоном измеряемых температур от 100 до 200 °С и ценой деления шкалы 2 °С - по ГОСТ 28498;
- часы - по ГОСТ 3145.

Допускается использование иных средств измерений, вспомогательного оборудования и реактивов по ТНПА с техническими и метрологическими характеристиками, не ниже указанных.

5 Условия измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны соблюдаться следующие условия:

- температура воздуха при приготовлении растворов и выполнении измерений – (20 ± 5) °С;
- атмосферное давление – 84,0 – 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха – 65 ± 15 %;

6 Требования безопасности

При проведении измерений необходимо соблюдать требования инструкций по технике безопасности, действующие в лаборатории и требования следующих документов:

«Основные правила безопасной работы в химических лабораториях» М.: Химия, -1979 г.

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», Изд.-2е, перераб. и доп., М. Энергоатомиздат, 1986г.

«Общие правила пожарной безопасности Республики Беларусь для общественных зданий и сооружений. ППБ 1.04-2002».

7 Требования к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработке результатов могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее специальное образование по профилю выполняемых работ, опыт работы в химической лаборатории, изучившие требования безопасности и настоящую методику.

8 Подготовка к выполнению измерений

Подготовка сушильного шкафа и водяной бани производится согласно эксплуатационной документации на них. Перед включением в сеть в баню



наливают дистиллированную воду на 2-3 см³ ниже краев бани. Воду в бане нагревают до кипения и поддерживают постоянную температуру в течение всего времени нагревания.

8.1 Определение массы пустой фарфоровой чашки

Фарфоровую чашку помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре от (105 ± 2) °С в течение 1-2 ч. Переносят чашку в эксикатор с хлористым кальцием для охлаждения не менее чем на 30 мин, после чего взвешивают.

Массу пустой чашки определяют высушиванием до постоянного веса. Высушивание прекращают, когда снижение массы 3-х наблюдений не будет превышать 0,005 г.

8.2 Отбор проб

Отбор проб коньяков и коньячных спиртов производят в соответствии с СТБ 1384.

9 Выполнение измерений

В фарфоровую чашку с помощью пипетки вносят 100 см³ образца, выпаривают на бане досуха и высушивают в сушильном шкафу при температуре (105 ± 2) °С в течении 4-6 ч. Чашку с экстрактом переносят в эксикатор для охлаждения не менее чем на 30 мин, после чего ее взвешивают. Высушивание образцов ведут до получения разности между двумя последующими взвешиваниями не более 0,005 г.

Результаты взвешивания определяют до четвертого десятичного знака после запятой.

10 Обработка результатов

Массовую концентрацию общего экстракта (X) в граммах на дециметр кубический (г/дм³), вычисляют по формуле:

$$X = \frac{(m - m_1)}{V} * 1000 \quad , \quad (1)$$


где:

m – масса чашки с экстрактом после высушивания, в граммах (г);

m_1 – масса пустой чашки, в граммах (г);

V – объем коньяка или коньячного спирта, взятый на определение, см³;

1000 – коэффициент пересчета на один дециметр кубический (1 дм³);

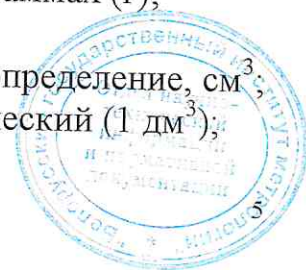

Вычисления проводят до третьего десятичного знака после запятой.

За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до второго знака после запятой, допускаемое расхождение между которыми удовлетворяет следующему требованию:

$$|X_1 - X_2| \leq 0,01 * \bar{X} * r, \quad (2)$$

где:

X_1 и X_2 - массовые концентрации общего экстракта, полученные в параллельных определениях в условиях повторяемости, г/дм³;

\bar{X} - среднее арифметическое значение двух параллельных определений массовых концентраций общего экстракта, г/дм³;

r - предел повторяемости, % отн. (табл. 2);

В случае невыполнения условия (2) анализ повторяют.

Массовую концентрацию сахаров (B) определяют по ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Методы определения сахаров» п.1 методом Бертрана.

Допускаемое абсолютное расхождение между результатами параллельных определений при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать 0,011 г/100 см³ при массовой концентрации сахара до 1 г/100 см³. Допускаемое относительное расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности $P=0,95$ не должно превышать 1,2 % при массовой концентрации сахара 1 г/100 см³ и более. Вычисления проводят до третьего десятичного знака после запятой.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений и округляют его до второго десятичного знака после запятой.

Массовую концентрацию приведенного экстракта (X_I) в граммах на дециметр кубический (г/дм³) вычисляют по формуле:

$$X_I = X - 10 * B, \quad (3)$$

где:

X - массовая концентрация общего экстракта, в граммах на дециметр кубический (г/дм³);

B - массовая концентрация сахаров, в граммах на сто сантиметров кубических (г/100 см³);

- 10 - коэффициент для пересчета на 1 дм³.

Вычисления проводят до второго десятичного знака после запятой.

За окончательный результат измерения приведенного экстракта принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, рассчитанное до третьего десятичного знака после запятой и округленное до



второго десятичного знака после запятой, допускаемое расхождение между которыми удовлетворяет следующему требованию:

$$|X_1 - X_2| \leq 0,01 * \bar{X} * r, \quad (4)$$

где:

X_1 и X_2 - массовые концентрации приведенного экстракта, полученные в параллельных определениях в условиях повторяемости, г/дм³;

\bar{X} - среднее арифметическое значение двух параллельных определений массовых концентраций приведенного экстракта, г/дм³;

r - предел повторяемости, % отн. (табл. 2);

В случае невыполнения условия (4) анализ повторяют.

11 Оформление результатов

Результат измерений представляется в виде

$$\bar{X} \pm \Delta \quad (5)$$

где:

\bar{X} - среднее значение результата измерений, г/дм³;

Δ - показатель точности (погрешность) методики выполнения измерений, % отн. (табл. 1).

Если измеренное значение меньше предела измерения методики, то производится односторонняя оценка результата измерений

$$\bar{X} < L \quad (6)$$

где:

\bar{X} - среднее значение результата измерений, г/дм³;

L - предел измерения методики.

12 Контроль точности получаемых результатов испытаний

Контроль показателей качества методики выполнения измерений включает контроль стабильности результатов измерений на соответствие установленным нормативам контроля.

Контроль стабильности результатов измерений общего экстракта осуществляется на основе контроля прецизионности (повторяемости, воспроизводимости) и точности (погрешности).

Контроль стабильности результатов измерений приведенного экстракта осуществляется на основе контроля повторяемости и воспроизводимости.

Процедура контроля выполнения измерения осуществляется по п.п. 12.1-12.3 настоящей методики выполнения измерений.



12.1 Контроль повторяемости

Контроль повторяемости результатов измерений общего и приведенного экстракта осуществляется при каждом выполнении измерений рабочих проб коньяка и коньячного спирта по п. 10.

12.2 Контроль внутрилабораторной прецизионности (воспроизводимости)

Контроль внутрилабораторной воспроизводимости общего и приведенного экстракта проводят на рабочих пробах, которые анализируют по п. 9, п. 10 методики выполнения измерений. В работе участвуют 2 аналитика, измерения выполняют в разное время.

Воспроизводимость признают удовлетворительной, при выполнении условия

$$|\bar{D}_I - \bar{D}_{II}| \leq 0,01 * \bar{D} * R \quad (7)$$

где:

R – предел воспроизводимости общего (приведенного) экстракта (табл.1), % отн.;

\bar{D}_I и \bar{D}_{II} – значения массовых концентраций общего (приведенного) экстракта, полученных в условиях повторяемости, г/дм³;

$\bar{D} = |\bar{D}_I + \bar{D}_{II}| / 2$ – среднеарифметическое значение \bar{D}_I и \bar{D}_{II} .

В случае нарушения данного условия, анализ повторяют. При повторном нарушении выясняют причины некорректных результатов контроля и их устраняют.

12.2 Контроль точности

Контроль точности результатов анализа общего экстракта осуществляют на рабочих пробах и пробах с добавками. Содержание общего экстракта в пробе с добавкой не должно превышать диапазона измерений, установленного МВИ.

Первоначально определяют содержание общего экстракта в рабочей пробе (\bar{D}_p), затем - в рабочей пробе с добавкой (\bar{D}_{p+d}). В качестве добавки используют экстракт того же образца. Для этого в чашку с сухим экстрактом, полученным в результате анализа, вносят 100 см³ рабочей пробы и проводят анализ по п. 9 настоящей методики.

Точность результатов измерений признают удовлетворительной при выполнении следующего условия:

$$|\bar{D}_{p+d} - \bar{D}_p - C_d| \leq 0,01 * 1,41 * \bar{D}_p * \Delta \quad (8)$$



где:

Δ - показатель точности (погрешность) методики выполнения измерений, % отн. (табл.1);

\bar{X}_p - измеренное содержание общего экстракта в рабочем образце, г/дм³;

\bar{X}_{p+d} - измеренное содержание общего экстракта в образце с добавкой, г/дм³;

C_d - величина добавки, равная \bar{X}_p , г/дм³.

В случае невыполнения данного условия, анализ повторяют. При повторном нарушении выясняют причины некорректных результатов контроля и их устраняют.

Методика разработана лабораторией испытания и исследования продукции и сырья РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».

Разработчики:

Начальник лаборатории, к.с/х наук







Старший научный сотрудник

Старший научный сотрудник

Старший научный сотрудник

Младший научный сотрудник

Инженер-химик

	И.М.Почицкая
	В.Л. Рослик
	О.Е.Саблина
	Т.В.Горбачева
	М.В.Силич
	Т.Н.Еремич





ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
**“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ”**
- БелДІМ -

Республиканское унитарное предприятие
**“БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ”**
- БелГИМ -

Старавіленскі тракт 93, г. Мінск, 220053
Тэлефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. пошта: info @ belgim.by
Разліковы рахунак: 3012002840020
у філіяле ААТ БелПББ па г. Мінску,
код: МФО 153001334, праспект Машэрава, 80

Старовиленский тракт 93, г. Минск, 220053
Телефон (017) 233 55 01 Факс (017) 288 09 38
Эл. почта: info @ belgim.by
Расчётный счёт: 3012002840020
в филиале ОАО БелПСБ по г. Минску,
код: МФО 153001334, проспект Машерова, 80

30.03. 2007 г. № 1
На № _____ от _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 435/2007
об аттестации МВИ

**Определение содержания общего экстракта в коньяках
и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках.
Методика выполнения измерений**

Методика выполнения измерений, разработанная РУП "Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по продовольствию", и регламентированная в **МВИ.МН 2669-2007 «Определение содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках. Методика выполнения измерений»** аттестована в соответствии с ГОСТ 8.010-99.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке и экспериментальному исследованию МВИ.

В результате аттестации установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками при принятой доверительной вероятности $P=0,95$:

Определяемый показатель (компонент)	Диапазон измерений (массовая концентрация), г/дм ³	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_R , %	Показатель правильности (границы, в которых находится неисключенная систематическая погрешность) $\pm \Delta_c$, %	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность) $\pm \Delta$, %
Общий экстракт	От 0,5 до 20,0	1,6	2,5	0,11	2,2
Приведенный экстракт	От 0,5 до 4,20	1,8	2,9	3,3	4,1

И.о. заместителя директора



Т.А. Коломиец

УТВЕРЖДАЮ
Директор БелГИМ

Н.А. Жагора



ЭКСПЕРТНОЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам метрологической экспертизы
методики выполнения измерений

Наименование МВИ: Определение содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках.
Методика выполнения измерений

Разработчик: Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

На метрологическую экспертизу представлены следующие документы:

- 1 Методика выполнения измерений (МВИ)
- 2 Отчет о метрологической аттестации (Протокол проведения исследований по установлению значений показателей точности методики выполнения измерений по определению содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках)

По результатам метрологической экспертизы установлено:

1 Представленная методика предназначена для определения содержания общего экстракта в коньяках и коньячных спиртах и приведенного экстракта в коньяках и обладает следующими метрологическими характеристиками:

Определяемый показатель (компонент)	Диапазон измерений (массовая концентрация), г/дм ³	Показатель повторяемости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_r , %	Показатель воспроизводимости (среднеквадратическое отклонение повторяемости) σ_R , %	Показатель правильности (границы, в которых находится неисключенная систематическая погрешность) $\pm \Delta_c$, %	Показатель точности (границы, в которых находится погрешность) $\pm \Delta$, %
Общий экстракт	От 0,5 до 20,0	1,6	2,5	0,11	2,2
Приведенный экстракт	От 0,5 до 4,20	1,8	2,9	3,3	4,1

2 Методика соответствует требованиям ГОСТ 8.010-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения».

3 Методика может быть использована при выполнении вышеперечисленных работ.

И.о. заместителя директора

Начальник отдела испытаний
пищевой и с/х продукции

Т.А. Коломиец

Г.В. Артеменко